

1 Saque/Colocación de la Sonda.

Saque la sonda: Mantenga la unidad principal con una mano, Pellizca la sonda y tire hacia al exterior con esfuerzo suave.



Colocación de la Sonda: Mantenga la unidad principal con una mano. Pellizca la sonda y alinee el titular de la sonda. Empuje la sonda hacia al exterior con esfuerzo suave hasta que encaje en la posición.



Nota: Saque la sonda antes de encender el Doppler, y pellizca la sonda despues de apagado el Doppler.

2 Encendido/Apagado el Doppler

Encendido: Prese el botón **POWER** sobre el panel frontal para encender el Doppler.

Si la sonda no esta conectado o mal conectado, la pantalla LCD mostraría una señal "--- MHz". Usted debe volver a conectar la sonda correctamente. Cuando la sonda esta bien conectado, la LCD deja de parpadear y mostraría la frecuencia de la sonda in la parte inferior donde la esquina derecha. Por ejemplo **2 MHz**.

Apagado: Prese el botón **POWER** sobre el panel frontal para apagar el Doppler.

Para **SONOTRAX Basic**, **SONOTRAX Basic A**, **SONOTRAX Pro**, **SONOTRAX II** and **SONOTRAX II Pro**, el Doppler seria apagado automaticamente si no tenga el señal de entrada o . if there is no input signal or ninguna operación se lleva a cabo durante 60 segundos.


3 FHR Examinación

- 1) Confirme la posición de fetos a mano y determine la posición probable de la sonda para la examinación optima de FHR.
- 2) Saque le sonda y encendido el Doppler.
- 3) Aplicar una cierta cantidad de gel de acoplamiento a la placa frontal de la sonda y colocar la sonda contra el abdomen en la ubicación predeterminada. Mueva la sonda alrededor o inclinarlo hasta que un sonido claro y rítmica del corazón se escucha de los auriculares o el altavoz. Al mismo tiempo, un FHR numérico se visualiza en la pantalla LCD (**excepto SonoTrax Lite**).

4 Instalación de la batería.

NOTA: La batería de **SONOTRAX II** y **SONOTRAX II Pro** es fijado en la tapa del compartimiento. Comienza desde 3 paso para la instalación.

- as:) Gire el Doppler al revés.
Mantenga la unidad principal con una mano; preme el pulgar de la otra mano en la muesca de la cubierta y empuje hacia arriba y hacia adelante. La tapa del compartimiento será abierto.

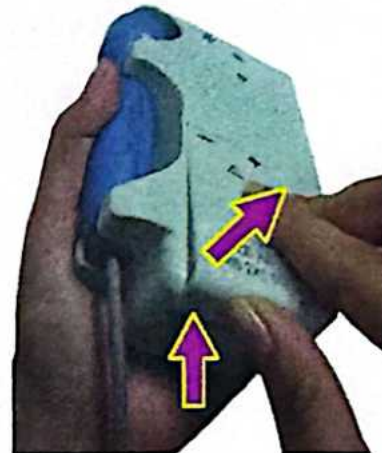


- 2) Ponga las pilas alcalinas o baterías de NI-MH en la tapa del compartimiento de la batería.

ATENCIÓN: La dirección de las baterías debe cumplir con la marca polarla cubierta.

Conexión inversa está prohibida.



- 3) Ponga la tapa del compartimiento de la batería en el compartimento, empujarla hacia adelante y hacia abajo hasta que cerrada.

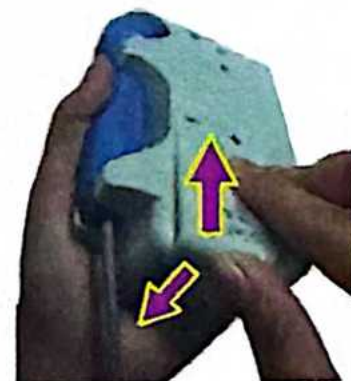

5 Colocación/Carga de la batería.

- 1) Sustitución de las baterías alcalinas: Saque las baterías viejas, e instale otras nuevas con especificaciones idénticas. Deseche las baterías usadas según las normativas locales.

ATENCIÓN: Favor no cargar la batería alcalina.

- 2) Carga de las baterías de Ni-MH: Retire las baterías recargables de Ni-MH del Doppler y carguelas con un cargador de batería de Ni-MH que cumpla con las especificaciones (Entrada: AC 100-240V, 50Hz / 60Hz; la salida: CC 1.45V * 2, 500mA).

ATENCIÓN: Asegúrese de que las baterías no están conectadas al revés antes de conectar el cargador a la toma de corriente.

- 2) Carga de la pila de batería NI-MH (Para **SONOTRAX II** y **SONOTRAX II Pro**): Ponga el enchufe del adaptador en la toma de carga del Doppler, y conecte el adaptador a una toma de corriente (AC 100-240V, 50Hz/60Hz). Durante la carga, el indicador de carga se ilumina. Cuando el indicador de carga se apaga, la batería está completamente cargada (se necesitan aproximadamente 3 a 4 horas)

NOTA: El Doppler no está disponible para la examinación durante la carga.

6 Sustitución de la sonda.

Retire la sonda vieja: Apagado el Doppler, mantenga la unidad principal con una mano y pellizca la chaqueta de la Mini USB.

Levante la cubierta ligeramente y tire con una fuerza suave; saque la sonda.

NOTA: No tire directamente del cable de la sonda.

Sustitución de una sonda nueva: Coloque el conector USB de la nueva sonda en la interfaz de la sonda del Doppler.

7 Examinación del vascular (Optional)

4MHz, 5MHz o 8MHz sondas de cascular se puede conectar con el Doppler para realizar la examinación del vascular.

P/N: 01.54.457319

MPN: 01.54.457319010