

Reguladores de vacío Push-To-Set[™]

Modelos Continuo/intermitente y Continuo



ADULTO • NEONATAL • PEDIÁTRICO

Especificaciones del regulador de vacío Push-To-Set™

Regulador de vacío patentado Push-To-Set™

Durante más de 50 años, Ohio Medical ha suministrado productos de succión a centros médicos de todo el mundo. Nuestros reguladores de vacío siguen siendo la opción de preferencia por su máximo rendimiento, alta calidad y mínimo mantenimiento.

Las características de seguridad incluyen: Dispositivo automático de oclusión Push-To-Set™, Quick-To-Max, dos vueltas para vacío máximo de línea de pared, ajuste de nivel de vacío con una mano.



INTERRUPTOR ON/OFF MONTADO EN LA PARTE SUPERIOR
Para facilidad de uso

ROTULACIÓN CLARA
Muestra el modo en que se encuentra la unidad (continuo/intermitente y continuo)

INDICADOR FOSFORESCENTE
Proporciona visibilidad en situaciones de baja iluminación o sin luz



CARCASA RESISTENTE A LOS GOLPES
Diseño ergonómico y estilizado

PUSH-TO-SET™ PATENTADO
La característica integrada elimina la necesidad de ocluir el tubo del paciente para establecer los niveles de vacío

QUICK-TO-MAX
Solo se requieren dos giros desde cero para el vacío máximo de línea de pared

AJUSTE DE ARRANQUE

El modo continuo/intermitente se inicia con el ciclo "ON" - ¡SIN esperas!

CICLOS DE TEMPORIZACIÓN TOTALMENTE AJUSTABLES

Ajuste predeterminado a 15 segundos ON / 8 segundos OFF (solo en el modelo Continuo/Intermitente)

RESISTENTE Y FIABLE

Resiste las caídas, mantiene la calibración



INDICADOR DIGITAL TAMBIÉN DISPONIBLE

Indicador de tamaño grande y fácil lectura

PRECISIÓN DIGITAL

Para seguridad del paciente (+/- 1% de la escala total)



PATENTED

GARANTÍA DE

10 AÑOS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA*

*Solo Norteamérica

Opciones disponibles:

Continuo o Continuo/Intermitente • Analógico o Digital • Adulto o Alto • Pediátrico o Neonatal



Unidades RM disponibles: Solo unidades analógicas de los modelos Continuo y Continuo/Intermitente para adultos

Regulador de vacío Push-To-Set™ continuo/intermitente

Continuo/Intermitente | I (CONT), O (OFF), IOIO (INT)



*Consulte la tabla de códigos de pedidos en la página 7 para ver las conexiones necesarias y el número de referencia completo para pedidos.

	Adulto	Pediátrico	Neonatal
Rango de manómetro	Estándar (0-200 mmHg - Vacío máximo)	Vacío bajo (0-160 mmHg)	Vacío bajo Digital: (0-100 mmHg) Analogico: (0-160 mmHg)
Banda de colores	Vacío bajo, medio, alto y máximo		Vacío bajo, medio, alto
Vacío regulado	0-200 mmHg	0-135 mmHg	0-100 mmHg

Característica clave de seguridad: Válvula de descarga de seguridad de presión positiva (solo en Pediátrico y Neonatal)

Especificaciones técnicas de Continuo/Intermitente

Adulto		Pediátrico	Neonatal
Intervalos de vacío	0-200 mmHg y vacío máx. de línea de pared	0-135 mmHg	0-100 mmHg
Caudal	Modo intermitente: Predet. a 8 L/min Modo continuo: 0-80 L/min	Modo intermitente: Predet. a 8 L/min Modo continuo: 0-50 L/min	
Precisión del indicador	Analógico: ± 5% de escala completa Digital: ± 1% de escala completa		
Baterías	Solo digital: Litio primario 2/3AA, 3,6 V, 1,6 Ah Número de referencia: VR-DGP-BAT (se requieren dos)		
Temporización*	Conmutación ON/OFF silenciosa, ajuste predeterminado 15 segundos ON / 8 segundos OFF (± 3 segundos), ajustable en cabecera, empieza en el modo ON		

*La temporización se aplica únicamente a las unidades Continuo/Intermitente

Regulador de vacío continuo Push-To-Set™

Continuo de dos modos (Adulto) | I (ON), O (OFF)



1225*
Adulto - Estándar



1325*
Adulto - Estándar

	Adulto	Alto
Rango de manómetro	Estándar (0-200 mmHg - Vacío máximo)	Vacío alto (0-760 mmHg)
Banda de colores	Vacío bajo, medio, alto y máximo	Naranja sólido / variable al naranja
Vacío regulado	0-200 mmHg	0-Vacío máximo de línea de pared

*Consulte la tabla de códigos de pedidos en la página 7 para ver las conexiones necesarias y el número de referencia completo para pedidos.



1330*
Adulto - Alto



1430*
Adulto - Alto

Continuo de tres modos (Adulto) | I (ON), O (OFF)



1224*
Adulto - Estándar



1324*
Adulto - Estándar

	Adulto	Alto
Rango de manómetro	Estándar (0-200 mmHg - Vacío máximo)	Vacío alto (0-760 mmHg)
Banda de colores	Vacío bajo, medio, alto y máximo	Naranja sólido / variable al naranja
Vacío regulado	0-200 mmHg	0-Vacío máximo de línea de pared
	Vacío máximo de línea de pared instantáneo	

*Consulte la tabla de códigos de pedidos en la página 7 para ver las conexiones necesarias y el número de referencia completo para pedidos.



1226*
Adulto - Alto



1326*
Adulto - Alto

Continuo de dos modos (Pediátrico y Neonatal) | I (ON), O (OFF)



1234*
Pediátrico



1334*
Pediátrico

	Pediátrico	Neonatal
Rango de manómetro	Vacío bajo (0-160 mmHg)	Vacío bajo Digital: (0-100 mmHg) Analógico: (0-160 mmHg)
Banda de colores	Vacío bajo, medio, alto	
Vacío regulado	0-135 mmHg	0-100 mmHg

Característica clave de seguridad: Válvula de descarga de seguridad de presión negativa (solo en Pediátrico y Neonatal)



1231*
Neonatal



1331*
Neonatal

*Consulte la tabla de códigos de pedidos en la página 7 para ver las conexiones necesarias y el número de referencia completo para pedidos.

Especificaciones técnicas del modelo Continuo

	Adulto	Alto	Pedriátrico	Neonatal
Intervalos de vacío	0-200 mmHg y vacío máx. de línea de pared	0-760 mmHg	0-135 mmHg	0-100 mmHg
Caudal	0-80 L/min		0-50 L/min	

Precisión del indicador

Analógico: $\pm 5\%$ de escala completa
Digital: $\pm 1\%$ de escala completa

Baterías

Solo digital: Litio primario 2/3AA, 3,6 V, 1,6 Ah | Número de referencia: VR-DGP-BAT (se requieren dos)

Accesorios del regulador de vacío

Colector de seguridad ante desbordamientos



Casquillo de bloqueo
6700-0365-901



Apriete manual DISS
6702-0365-901



Tuerca DISS de mariposa
6703-0365-901

Filtro hidrófobo descartable



Tubería x Boquilla de tubería
6730-0571-800 10/paq.
6730-0572-800 50/paq.



NPT 1/8" roscado x Boquilla de tubería
6730-0581-800 10/paq.
6730-0582-800 50/paq.

Piezas de acoplamiento de colector

Las piezas se ajustan al puerto inferior del regulador. El casquillo de bloqueo solo se ajusta con el 6700-0365-901. El conector macho DISS solo se ajusta con el 6702-0365-901 y 6703-0365-901.



NPT 1/8" x
Casquillo de bloqueo
6700-0144-700



NPT 1/8" x
Macho DISS
6700-0524-802

Filtro hidrófobo descartable



6730-0350-800 20/paq.
6730-0351-800 200/paq.

Colector de seguridad ante desbordamientos Sure-Trap™



NPT 1/8 Macho
7725-0365-912 12/paq.
7725-0365-925 25/paq.
7725-0365-950 50/paq.

Conexión universal DISS



NPT 1/8" de plástico x Macho DISS
Rosca y casquillo hembra DISS
6700-0725-800

Opciones adicionales

¿Sabía que...?

Con frecuencia, en la mayoría de procedimientos de succión se establecen niveles de succión más altos que los recomendados.

Nota: Si no se realiza la oclusión en un nivel determinado, se puede producir una succión excesiva.

Nota: Niveles de succión más altos que los recomendados podrían causar daños/hemorragia en los tejidos.

Nota: La rotura de tejidos puede producir infecciones*

*Referencia: Neonatal Intensive Care, número de mayo-junio 2008, Artículo: Enhancing the Safety of Medical Suction Through Innovative Technology, de Patricia Carroll, RN, BC, CEN, RRT, MS

Opciones de color disponibles


Carcasa de colores

Las opciones de carcasas de colores permiten indicar rápidamente la propiedad por departamentos o las aplicaciones clínicas especiales. Esta opción está disponible para reguladores analógicos o digitales. Las carcasas de colores están disponibles en: azul, celeste, rosado, morado, rojo y amarillo. Vea la página 7 para pedidos de carcasas de colores.



Perillas de colores

Otra opción de etiquetado para los reguladores son las perillas de colores. Las perillas están disponibles en 10 colores diferentes: dorado, durazno, azul, sandía, gris claro, morado, rosado, turquesa, gris oscuro y lima. Se pueden usar en reguladores analógicos o digitales. Comuníquese con su representante local para obtener los datos de pedido.

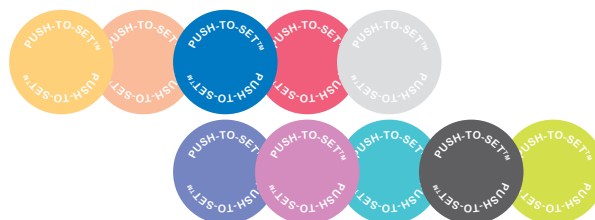

87 XX - XXXX - 9 XX



1111 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031 USA
866.549.6446
www.ohiomedical.com

Dispositivos de terapia de succión y oxígeno | Máquinas de succión portátiles
Equipos de tuberías de gas de uso médico | Vacío - Compresores de aire - Accesorios



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20 2514 AP La Haya, Países Bajos

PROMOTOR EN AUSTRALIA: EMERGO AUSTRALIA
Level 20, Tower II Darling Park 201 Sussex Street Sydney, NSW 2000 Australia

© 2020 Ohio Medical LLC. Reservados todos los derechos. Este documento contiene información patentada y confidencial de Ohio Medical LLC. El uso de esta información está bajo licencia de Ohio Medical LLC. Se prohíbe cualquier otro uso que no sea el autorizado por Ohio Medical LLC. Ohio Medical LLC y el logotipo de Ohio Medical LLC son marcas registradas, y Push-To-Set es una marca registrada de Ohio Medical, LLC. Patente EE. UU. #6 623 463 (Sistema de vacío Push-To-Set). Puritan Bennett es una marca registrada de Nellcor Puritan Bennett LLC. Schrader es una marca registrada de Schrader-Bridgeport International, Inc. Chemetron y MedStar son marcas registradas de Allied Healthcare Products, Inc.