


Polaris® 100/200

Lámparas de quirófano

En el quirófano, la correcta iluminación es esencial para el éxito. Los sistemas de iluminación quirúrgica Polaris® 100/200 proporcionan luz fría con colores naturales y un rico contraste durante miles de horas de funcionamiento, sin preocupaciones y sin comprometer el presupuesto del hospital.

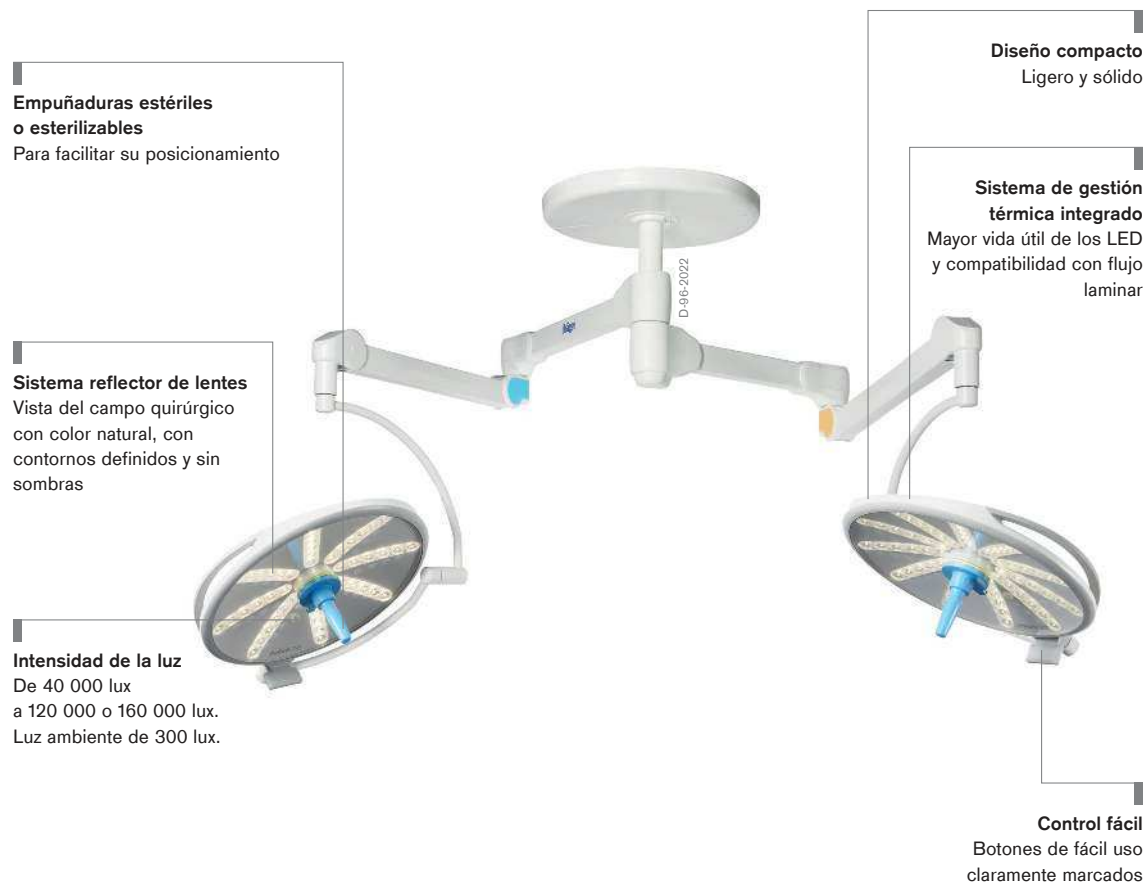

Ventajas

Tecnología LED en el quirófano

Los LED son fuentes de luz muy eficientes para las aplicaciones quirúrgicas. Ahora Dräger ha combinado las ventajas de esta innovadora fuente de luz con un nuevo diseño, muy compacto y ligero pero sólido, que incluye reflectores de lentes individuales para proporcionar una óptima salida lumínica y un control de sombras más eficaz. El poco calor que producen los LED se regula y disipa mediante un sistema de gestión térmica integrado. La temperatura máxima del cabezal de la lámpara (superficie superior) no sobrepasará los 35 °C*. Esta tecnología LED, que tiene una vida útil media de 50 000 horas, resulta fiable y asequible.

* A una temperatura ambiente de 20 °C.

Polaris 100

La nueva lámpara Polaris® 100 es muy compacta e incluye 48 LED con una intensidad lumínica que abarca de los 40 000 a los 120 000 lux. Un modo especial proporciona luz ambiente a partir de un único LED para facilitar la iluminación en procedimientos mínimamente invasivos. El cabezal de la lámpara, tan elegante como resistente, pesa solo 13 kg y su colocación es muy cómoda y sencilla. Dado que el cabezal de la lámpara no dispone de partes móviles, este sistema apenas requiere mantenimiento. El sistema Polaris logra un índice de reproducción cromática Ra de 95 y un índice de reproducción cromática R9 de 93, lo que garantiza una iluminación natural y rica en contrastes sin perjudicar los tonos rojos. El sistema de iluminación Polaris 100/200 puede equiparse con luces LED blanco cálido, blanco neutro o blanco frío (4400 K, 5000 K o 5600 K).

Polaris 200

La lámpara Polaris 200, que mantiene las dimensiones externas y el diseño, le proporciona 18 LED adicionales hasta sumar un total de 66. Esto se traduce en una intensidad máxima de 160 000 lux. La intensidad lumínica se puede reducir fácilmente a 40 000 lux. La temperatura de color y el índice de reproducción cromática son idénticos a los de la Polaris 100.

Cada LED está equipado con su propio sistema de lentes reflectores. La columna de luz homogénea de ambas lámparas ofrece al cirujano una vista del campo quirúrgico en color natural, con contornos definidos y con control de sombras.

Diseño compacto, funcionamiento sencillo

El clásico diseño redondo incluye asas integradas que permiten su manejo por parte del personal situado en la zona no estéril y paneles de control táctiles que permiten una manipulación y una operación sencillas. El personal situado en la zona estéril puede posicionar fácilmente la lámpara Polaris® 100/200 con la empuñadura central estéril. Dependiendo de su plan de prevención de infecciones, puede elegir entre la empuñadura esterilizable o la estéril. Cada uno de los cuatro botones de control claramente designados realiza una única función; además, se puede instalar opcionalmente un panel de control de montaje en pared. La carcasa, lisa y suave, facilita una limpieza rápida y sencilla, mientras que su construcción ligera permite posicionar la lámpara prácticamente sin esfuerzo.

Ventajas

Instalación y mantenimiento fáciles

El sencillo diseño de las lámparas Polaris 100/200 hace que la instalación y el mantenimiento resulten muy fáciles. Los cabezales de las lámparas se controlan gracias al sistema de comunicaciones mediante cable eléctrico (PLC), cuya eficacia está ampliamente demostrada.

Polaris 100/200: simplemente buena luz

El sistema de iluminación quirúrgica Polaris 100/200 es una solución económica y de alto rendimiento para las necesidades diarias del quirófano. Esta eficaz herramienta está diseñada para proporcionar años de uso sin preocupaciones y con un mantenimiento mínimo. Gracias a su excepcional fiabilidad y relación precio/rendimiento podrá reducir los costes de la inversión inicial y los costes de mantenimiento y operación futuros.

Lámpara móvil Polaris 100/200

La lámpara móvil Polaris puede usarse como lámpara independiente adicional en el quirófano, por ejemplo, durante intervenciones cardiovasculares en las que el paciente debe ser sometido a varios procedimientos a la vez. La luz móvil de alta calidad también puede utilizarse, por supuesto, en casos de emergencia o en salas de tratamiento. La lámpara móvil Polaris 100/200 resulta particularmente útil cuando no es posible una instalación fija en el techo debido a la infraestructura. El carro de transporte dispone de una cubierta compacta cerrada, lo que simplifica las labores de limpieza. Las ruedas dobles de la parte trasera disponen de un sistema de frenado.

Con la lámpara Polaris su hospital contará con la más moderna tecnología LED de alto rendimiento, con un diseño funcional y de alta calidad. Polaris es adecuada como lámpara de quirófano o de tratamiento, y está disponible en una gama de intensidades de luz y temperaturas de color. Gracias a su capacidad de iluminación de hasta 160 000 lux y su soporte de cardán, que hacen posible colocar la lámpara con total precisión, la versión móvil tiene incontables aplicaciones. El ajuste de la altura mediante un mecanismo neumático permite que la lámpara se adapte sin esfuerzo a sus posiciones de transporte o funcionamiento. Cuando la lámpara está totalmente extendida, el espacio de trabajo que queda por debajo de la cúpula es de 2175 mm: ideal incluso para los cirujanos más altos. Sin embargo, la altura de transporte de la lámpara móvil Polaris 100/200 es de tan solo 1850 mm.

En caso de que se produzca un corte en el suministro eléctrico, la lámpara seguirá funcionando al menos durante tres horas gracias a su batería integrada. Cuando la carga de la batería desciende por debajo del 25 % (suficiente aproximadamente para 45 minutos de funcionamiento), se activa una señal de aviso acústica automática. Los indicadores de estado LED del carro de transporte también muestran el estado del suministro eléctrico y de la carga de la batería.

Detalles



D-6448-2017



D-6497-2017



D-6757-2017



D-25779-2017



D-104586-2014



D-104586-2013

Accesorios



D-9497-2017

Empuñadura esterilizable

La empuñadura reemplazable permite al cirujano configurar la lámpara de quirófano fácilmente y de forma independiente del personal no esterilizado. Fabricada en una sola pieza, se esteriliza con facilidad y puede manipularse con guantes quirúrgicos.

Accesorios

D-25851-2017



Empuñadura estéril

La empuñadura desechable puede montarse y retirarse fácilmente, y permite un manejo cómodo. Solo está disponible en lámparas de quirófano y soportes para pantallas Polaris.

Productos relacionados

D-4252-2022



Polaris® 600

Nuestra lámpara de quirófano representa innovación: La Dräger Polaris® 600 de Dräger facilita su trabajo con controles intuitivos y opciones de configuración versátiles. El concepto de un sistema «Preparado para el futuro» se adhiere a la filosofía de nuestra familia de productos, proporcionándole una iluminación excelente.

D-4254-2022



Polaris® Multimedia

Documente los procedimientos quirúrgicos con calidad estándar o profesional mediante una de las numerosas soluciones de vídeo flexibles, estándar o de alta resolución.

Especificaciones técnicas

Dräger Polaris® 100/200

	Polaris® 100	Polaris® 200
Intensidad de la luz a 1 m de distancia	40 000 – 120 000 lx	40 000 – 160 000 lx
Relación Ee/Ec	3,5 (mW/m²)/ lx	3,5 (mW/m²)/ lx
Intensidad de luz ambiente	300 lx	300 lx
Diámetro del campo de luz	200 mm	200 mm
Profundidad de iluminación L1 + L2 (20 %)	1300 mm	1300 mm
Profundidad de iluminación L1 + L2 (60 %)	750 mm	750 mm
Temperatura de color ¹	4400, 5000, 5600 Kelvin	4400, 5000, 5600 Kelvin
Índice de reproducción cromática Ra	95	95
Índice de reproducción cromática R9	93	93
Número de LED	48 LED en 8 módulos	66 LED en 11 módulos
Vida útil de los LED ²	aprox. 50 000 horas	aprox. 50 000 horas
Empuñadura esterilizable con diseño ergonómico	disponible	disponible
Empuñadura estéril con diseño ergonómico	disponible	disponible
Diámetro del cabezal	620 mm	620 mm

¹ La luz tendrá la temperatura de color que se desee.

² Todos los LED pierden un 20 % de su intensidad durante ese tiempo.

Opciones

Soporte para pantallas para pantallas 19"-42" (1 pliegue), o pantallas 19" – 32" (2 pliegues)	disponible
---	------------

Datos mecánicos de la lámpara móvil Polaris® 100/200

Anchura del carro de transporte	aprox. 760 mm
Tubo telescópico con ajuste de altura	400 mm
Altura del carro en posición de transporte	1,850 mm
Altura de trabajo	2,175 mm
Peso ³	130 kg

³ Peso del carro de transporte portátil (incluye brazo con resorte y cabezal)

Datos eléctricos

Tiempo de carga de la batería	aprox. 24 horas
Autonomía en caso de corte del suministro eléctrico (con la batería totalmente cargada)	aprox. 180 minutos

Observaciones

Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Alemania

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto



ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax -8321

BRASIL

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50

ESPAÑA

Dräger Hispania, S.A.U.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com